

## ∴ **Dermatoscope HEINE DELTA® 20 T**

Conjugué une optique de précision et la possibilité de passer d'un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé



**LED HQ**

LED NOW IN HEINE QUALITY.



## Images de haute qualité et souplesse de diagnostic

Le **Dermatoscope DELTA20 T** offre une optique de précision sans égale ainsi que la possibilité, à l'aide de la fonction «Toggle» (bascule), de passer d'un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé sans perdre de temps à échanger les embouts de contact. La dermatoscopie de contact avec liquides d'immersion demeure toujours possible. Il est donc possible d'adapter l'examen à chaque type de lésion et de réaliser le meilleur diagnostic possible.



Le terme « qualité » est aujourd'hui l'un des termes les plus galvaudés et les plus abusivement utilisés dans le but de vendre des produits. Cependant, seules quelques entreprises sont en mesure de concrétiser la qualité de leurs produits en termes d'atouts et d'avantages pour l'utilisateur final. HEINE définit les avantages de la qualité HEINE sur le plan de la performance, de la fonction et de la durabilité :




## PERFORMANCE

**Optique de précision HEINE.** Le système optique achromatique de haute qualité fournit des images haute résolution parfaitement nettes. Le système de mise au point permet d'atteindre un grossissement de 10 à 16 fois pour une vision détaillée de toutes les structures, même les plus petites.

**LED en HQ.** La nouvelle référence en matière d'éclairage à LED produit une lumière claire et parfaitement homogène avec un rendu fidèle des couleurs pour un diagnostic plus précis. Le rouge reste rouge, le bleu reste bleu. Température de couleur de 5000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) >80 sur une échelle de 100.



LED NOW IN HEINE QUALITY.

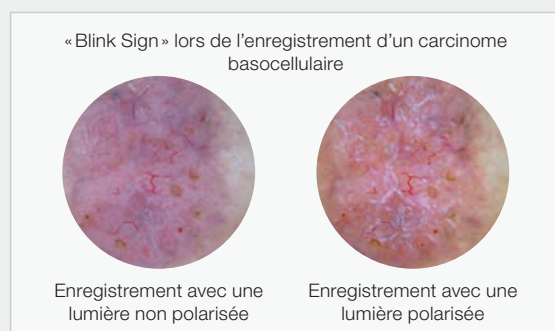

## FONCTION

**Fonction « Toggle » pour passer du mode d'éclairage polarisé au mode non polarisé.** Passage confortable de la vision polarisée à la vision non polarisée par un simple appui sur un bouton. Pas besoin de changer d'embout de contact. Cette nouvelle fonction permet lors de l'observation des structures et milieux cristallins de reconnaître ce que l'on nomme les « Blink Signs ».

**Petit embout de contact en option.** Petit embout de contact spécial pour les lésions d'accès difficile.

**Possibilités d'archivage numérique.** Le système de lentilles pour appareils numériques HEINE permet de raccorder sans problèmes l'instrument aux appareils reflex mono-objectif des plus grandes marques. Les lentilles spécialement adaptées réunissent l'appareil photo et l'optique du DELTA20 T et permettent ainsi une qualité d'image optimale.



## DURABILITÉ

**HEINE offre 5 ans de garantie.** HEINE ne fait aucun compromis pour fabriquer des instruments médicaux de haute qualité. Notre engagement pour l'intégration verticale au niveau de la fabrication signifie que nous contrôlons tous les aspects de la qualité de nos instruments.

**Gestion thermique des LED** – les systèmes d'éclairage à LED du DELTA20 T nécessitent une gestion thermique efficace pour garantir une performance constante et la stabilité du produit. La technologie de support à LED très moderne évacue parfaitement la chaleur des LED grâce à une conception optimisée en matériaux très performants. Elle garantit ainsi une intensité lumineuse constante et performante pendant toute la durée de vie jusqu'à 50.000 heures.



## INFORMATIONS DE COMMANDE

**Trousse DELTA20 T avec poignée rechargeable BETA4 NT**

L'ensemble comprend la tête de dermatoscope DELTA20 T, embout de contact avec graduation, **poignée rechargeable BETA4 NT avec chargeur de table NT 4**, 10 ml d'huile de dermatoscopie, étui rigide

K-262.24.420

**Trousse DELTA20 T avec poignée rechargeable BETA4 USB**

L'ensemble comprend la tête de dermatoscope DELTA20 T, embout de contact avec graduation, **poignée rechargeable BETA4 USB avec câble USB et bloc d'alimentation enfichable**, support de poignée, 10 ml d'huile de dermatoscopie, étui rigide,

K-262.28.388 

L'ensemble comprend la tête de dermatoscope DELTA20 T, embout de contact avec graduation, **poignée rechargeable BETA4 USB**, 10 ml d'huile de dermatoscopie, étui rigide,

K-262.28.387 **Trousse DELTA20 T avec poignée à piles BETA**

L'ensemble comprend la tête de dermatoscope DELTA20 T, embout de contact avec graduation, **poignée à piles BETA**, 10 ml d'huile de dermatoscopie, étui rigide

K-262.10.118

**Adaptateur Photo SLR**

pour dermatoscope / appareil photo numérique SLR, avec optique. Grand champ de vision, image nette.

pour Canon K-000.34.185  
pour Nikon K-000.34.186  
pour Olympus K-000.34.187



Pour plus d'informations et options de configuration voir: [www.heine.com](http://www.heine.com)

Sous réserve de modifications techniques.  
© 2016 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Tous droits réservés.

Votre distributeur

05/16. A-000.00.212 f